

**Инструкция по оформлению и печати заключения по случаю  
обращения**

На 7 листах

**2020 г.**

## 1 НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ


Для того чтобы пользователю была доступна работа с заключением, в Системе должны быть выполнены две следующие настройки:

1. Пользователю должна быть назначена одна из ролей: «Врач», «Доврачебный прием», «Выписной центр» (назначение ролей описано в п. 3.4.1 Руководства системного программиста ТМ:МИС SaaS).
2. Должна быть включена пользовательская настройка «Печать заключения ТАП (МО)» для каждого пользователя, осуществляющего печать. Включение настройки описано в п. 3.2.2 Руководства системного программиста ТМ:МИС SaaS.

## 2 ПЕЧАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

После оформления ТАП из сетки расписания и в личном кабинете пользователю доступна возможность печати заключения.

Для работы с заключением должны быть выполнены настройки, описанные в п. 1.

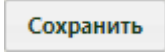После того как в ТАП внесены данные на вкладки «Лицевая сторона», «Оборотная сторона», «Услуги», «Медицинские записи», следует распечатать заключение для пациента. Для этого необходимо на форме ТАП нажать кнопку  (Рисунок 1).

ТАП/МКАБ № [redacted] Возраст: 47 лет 3 месяцев, Полис № 000

Лицевая сторона | Обратная сторона | Нетрудоспособность | Услуги | **Медицинские записи →** | Действия

Дата: 26.03.2020

Пациент:

Признак работающего: Нет

Инвалидность: не определено

Социальный статус: Работающий

Специалист/Ресурс: [redacted]

Вид оплаты: 1 - ОМС

Место обслуживания: 1 - Поликлиника

Цель посещения: 1.0 - Посещение по заболеванию

Тип диспансеризации:

Примечание:

27.03.2020  Завершенный случай

Рисунок 1. Нажатие кнопки «Сохранить» на форме ТАП  
Отобразится форма заключения, которую можно редактировать (Рисунок 2).

Внимание! Результаты посещения должны быть обязательно распечатаны и выданы на руки пациенту.

**Посещение врача от 26.03.2020**      Время записи 15:15      Время приема 11:21

Пациент		Врач	
Ф.И.О.		Ф.И.О.	
Дата рождения		Специальность	Хирургия
МКАБ №	2636	Каб. №	46

**Установленные диагнозы**

№	Тип	Наименование	Код МКБ-10
1	Основной	Другой острый синусит	J01.8

**Рекомендовано лечащему врачу**

Врач \_\_\_\_\_ (подпись) М.П.      \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Сохранить и печать      Отмена

Рисунок 2. Форма заключения

На форме заключения отображается информация об учреждении, данные пациента, врача, время записи (время, на которое был записан пациент) и время приема (фактическое время начала приема, когда врач нажал кнопку «Начать прием»), сведения об установленных диагнозах, а также рекомендации.

Поле «Рекомендовано лечащему врачу» может быть заполнено автоматически, если в шаблоне осмотра пациента (ЭПМЗ на вкладке «Мед. записи» ТАП) были указаны рекомендации для пациента. Поле также можно заполнить вручную с клавиатуры – для этого необходимо установить курсор мыши в поле и начать вводить текст (Рисунок 3).

### Рекомендовано лечащему врачу

1. Направить на рентген носовых пазух
2. Направить на анализ крови

Рисунок 3. Ввод рекомендаций в поле «Рекомендовано лечащему врачу» на форме заключения

Другие поля заполнять на форме нельзя, все данные автоматически загружаются в заключение из ТАП.

Внимание! Форма заключения с возможностью редактирования доступна пользователю до первой печати заключения (описано далее). После того как заключение будет распечатано, пользователю будет доступна форма заключения только с возможностью просмотра и повторной печати.

После ввода рекомендаций в поле «Рекомендовано лечащему врачу» следует сохранить и распечатать заключение, нажав кнопку **Сохранить и печать** (Рисунок 2).

Откроется вкладка браузера с печатной формой заключения (Рисунок 4). Дальнейшая печать выполняется средствами браузера при помощи кнопки «Печать».

Посещение врача от 26.03.2020    Время записи 15:15    Время приема 11:21

Пациент		Врач	
Ф.И.О.		Ф.И.О.	
Дата рождения		Специальность	Хирургия
МКАБ №	2636	Каб. №	46

**Установленные диагнозы**

№	Тип	Наименование	Код МКБ-10
1	Основной	Другой острый синусит	J01.8

**Рекомендовано лечащему врачу**

- Направить на рентген носовых пазух
- Направить на анализ крови

Врач \_\_\_\_\_ (подпись) М.П. \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Печать 1 лист бумаги

Принтер **Ip2 на 192.168.7.27**

Страницы **Все**

Копии **1**

Раскладка **Книжная**

Цветная печать **Черно-белая печать**

Дополнительные настройки

**Печать** **Отмена**

Рисунок 4. Печатная форма заключения

После нажатия кнопки печати вкладка с печатной формой заключения закроется, также закроется форма заключения и ТАП. Будет осуществлен возврат к сетке расписания.

Если печатать заключение нет необходимости, то форму с ним можно закрыть, нажав кнопку **Отмена** (Рисунок 2). В таком случае при следующем сохранении ТАП снова откроется форма заключения.

Распечатанное заключение можно повторно открыть для просмотра и печати. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши по ячейке расписания с пациентом – отобразится меню записи, в котором необходимо выбрать пункт «Распечатать посещение» (Рисунок 5).

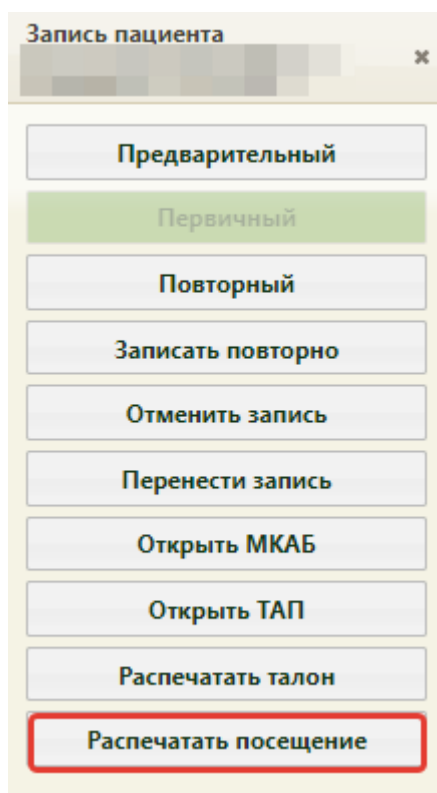


Рисунок 5. Кнопка печати посещения в меню записи

Отобразится форма заключения, которую уже нельзя редактировать, можно только просмотреть и распечатать (Рисунок 6). Для печати следует нажать кнопку **Печать**, расположенную под формой. После нажатия кнопки печати откроется вкладка браузера с печатной формой, дальнейшая печать выполняется средствами браузера (Рисунок 6).

							
<b>Посещение врача от 26.03.2020</b>				Время записи	15:15	Время приема	11:21
<b>Пациент</b>				<b>Врач</b>			
Ф.И.О.				Ф.И.О.			
Дата рождения				Специальность		Хирургия	
МКАБ №		2636		Каб. №		46	
<b>Установленные диагнозы</b>							
<b>№</b>	<b>Тип</b>	<b>Наименование</b>				<b>Код МКБ-10</b>	
1	Основной	Другой острый синусит				J01.8	
<b>Рекомендовано лечащему врачу</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Направить на рентген носовых пазух</li> <li>2. Направить на анализ крови</li> </ol>							
Врач		_____		_____			
		(подпись) М.П.		(фамилия, имя, отчество)			

**Печать**

Рисунок 6. Форма заключения, открытая из меню записи