

Регистрация забора биоматериала

Для регистрации забора биоматериала следует нажать кнопку



в строке с необходимым направлением. Регистрация биоматериала доступна только для направлений в статусе «Выписано».

писей: 1910 < Пред. 1 2 3 След. >

Диагноз	Направивший врач	Направлен в МО	Запись на прием	Статус
Z00 ?				Выписано
N48.8 ?				Выписано
Z00 ?				Завершено
A00 ?				Завершено
A00 ?			04.08.2022 07:00	Завершено

Кнопка «Редактировать»

В результате откроется форма «Направление на обследование».

Направление на обследование

Статус: Выписано

Дата	№ направления	Цель исследования	Причина направления
24.01.2023	470101457440670	2 - Диагностическое исследование	1 - Самообращение по жалобе

<input type="checkbox"/> Срочное	ТАП	Пациент
	23.01.2023	

Контингент	Группа риска
------------	--------------

Контингент обследуемого

МКБ-10
Z25.8 - Необходимость иммунизации против другой уточненной одной вирусной болезни

Направлен из медицинской организации

Направлен в медицинскую организацию

Вид оплаты

1 - ОМС

Причина направления (дополнительно)

Комментарий (выписка)
 Рост: 163
 Вес: 60.0
 Жалобы: Кровоточивость десен при чистке
 Анамнез жизни: ноома

Направивший врач

Исследования

Вид исследования	Лаборатория	Исследование	Статус
102 - Химико-микроскопические исследования		A09.19.006 - Исследование белка в кале	Направлено

Регистрация биоматериала

Дата и время забора	Штрихкод	Количество этикеток для печати	Биоматериал	Специалист
Нет данных для отображения				

[Добавить](#)

Печать/ЭМД
Заккрыть
Сохранить

Форма «Регистрация забора биоматериала»

Форма содержит следующие блоки:

- «Направление на обследование» – блок содержит заполненное направление пациента, в рамках которого осуществляется регистрация биоматериала. Недоступно для редактирования;
- «Исследования» – блок содержит список исследований в рамках направления. Блок доступен для редактирования для направлений в статусе «Выписано»;
- «Регистрация забора биоматериала» – блок содержит информацию о взятом биоматериале.

Для добавления информации о биоматериале следует нажать кнопку «Добавить» в блоке «Регистрация биоматериала».

Регистрация биоматериала

Дата и время забора	Штрихкод	Биоматериал	Специалист
Нет данных для отображения			
<input type="button" value="Добавить"/>			

Добавление информации в блок «Регистрация забора биоматериала»

В результате выполнения действия отображаются поля для заполнения:


Регистрация биоматериала

Дата и время забора	Штрихкод	Биоматериал	Специалист
Нет данных для отображения			
Штрихкод *	Биоматериалы *	Дата и время забора	Время
2236	108 - Кровь венозная	04.08.2022	15:13
Специалист			
	<input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Сохранить"/>		
<input type="button" value="Добавить"/>			


Заполнение блока «Регистрация забора биоматериала»

- «Дата и время забора» – в поле отображается дата и время регистрации забора биоматериала, в формате ДД.ММ.ГГГГ. ЧЧ:ММ. По умолчанию устанавливается текущая дата и время;
- «Штрихкод» – в поле отображается штрихкод пробирки. Заполнение данного поля возможно тремя способами:
 - Ручной ввод с клавиатуры;
 - Считывание сканером штрихкода с пробирки;
 - Формирование номера штрихкода с помощью кнопки . Формирование номера штрихкода регулируется системной настройкой «Режим генерации номеров пробирок(1 - ЦСЛИС,0 - МО)». Если номер штрихкода формируется из ЦС ЛИС, то поле будет недоступно для редактирования. Полученный порядковый номер имеет вид: 12 символов, первые два из которых – последние две цифры текущего года, остальные десять – порядковый номер пробирки, который формируется в зависимости от значения указанного в настройке. Поле обязательно для заполнения;
- «Биоматериал» – поле заполняется путём выбора значения из выпадающего списка. Обязательно для заполнения;
- «Специалист» – в поле отображается ФИО пользователя, авторизованного в системе.

В рамках одного направления все пробирки с биоматериалами имеют одинаковый штрихкод. После добавления первой пробирки, номер штрихкода автоматически подставляется для остальных пробирок с биоматериалом и поле «Штрихкод» недоступно для редактирования.

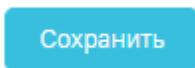

После заполнения блока «Регистрация забора биоматериала» необходимо нажать кнопку . Отобразится сообщение об успешном сохранении данных.

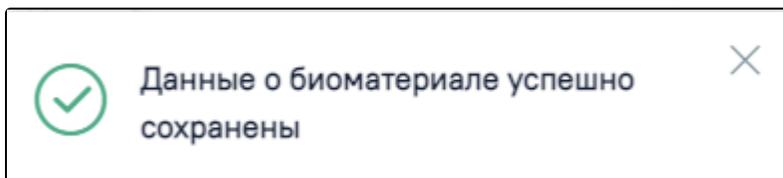

Сообщение об успешном сохранении данных

Для добавленной информации о биоматериалах доступны следующие действия:

- Кнопка «Редактировать» – открытие записи на редактирование;

- Кнопка «Печать» – печать штрихкода пробирки;
- Кнопка «Удалить» – удаление информации о добавленном биоматериале из списка.

Регистрация биоматериала

Дата и время забора	Штрихкод	Биоматериал	Специалист
04.08.2022	2236	108 - Кровь венозная	

Добавить

Доступные действия для добавленной информации о биоматериалах

На форме «Регистрация забора биоматериала» доступны кнопки «Печать», «Заккрыть» и «Сохранить».

Печать ▾
Заккрыть
Сохранить

Доступные кнопки на форме «Регистрация забора биоматериала»

При нажатии кнопки «Печать» откроется меню для выбора типа печатной формы.

Форма №57

Направление на обследование

Результаты по обследованию

Заключение по обследованию

Штрихкод пробирки

Печать ▾

Выбор печатной формы

При выборе пункта «Штрихкод пробирки» в новой вкладке браузера откроется печатная форма штрихкода. Для печати штрихкода следует нажать кнопку «Печать». Если в блоке «Регистрация биоматериала» не добавлена информация о биоматериале, пункт «Штрихкод пробирки» не доступен для выбора.




Штрихкод пробирки

При нажатии кнопки «Заккрыть» осуществляется переход в «Журнал регистрации забора биоматериала» без сохранения данных.

После нажатия кнопки «Сохранить» данные о регистрации забора биоматериала передаются в ЦЛИС.


Если информация о пробирке не отправлена в ЦЛИС, то в строке записи будет отображаться иконка . При наведении курсора на иконку отображается подсказка с описанием причины.

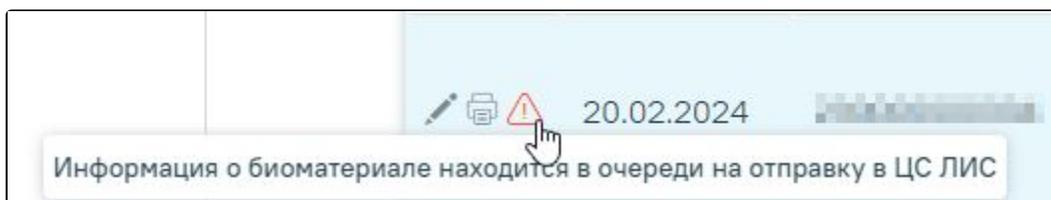

Уведомление с описанием причины

Биоматериалы с признаком «Отправлены в ЦЛИС» недоступны для редактирования и удаления. После отправки данных в ЦЛИС кнопка «Сохранить» недоступна. При добавлении нового материала кнопка «Сохранить» снова становится активной.

При нажатии кнопки «Сохранить» осуществляется проверка введенного номера штрихкода. Если с введенным номером штрихкода существует запись в другом направлении, появится предупреждающее сообщение, и данные о регистрации забора биоматериала не будут сохранены.

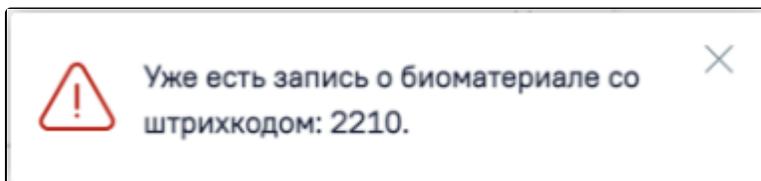

Предупреждающее сообщение