

# Блок «Журнал направлений»

## Создание пакета направлений

## Выписка пакета направлений

Работа с Журналом направлений доступна из [Случая лечения](#), [Карты мероприятий](#) и после нажатия кнопки «Журнал направлений» на главной странице Системы.

Блок «Журнал направлений» содержит список направлений пациента, в котором можно добавлять, изменять и удалять записи. Сортировка направлений осуществляется по их номеру. Новые направления расположены сверху, аннулированные в конце списка.

Журнал направлений

Выписать направление

Выписать пакет направлений

Создать пакет направлений

Выберите тип направления

Лабораторные исследования

×

Создать

Строк на странице: 5

Записей: 4

| № Направления                       | Дата направления | Куда направлен | Диагноз | Тип                             | Статус       | Записан          | Направивший врач    |
|-------------------------------------|------------------|----------------|---------|---------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <div>&gt; ...</div> 470101457554046 | 16.05.2023       | ГБУЗ МО        | C05.0   | На лабораторные исследования    | Завершено    | 24.05.2023 16:15 | Иванов<br>Онкология |
| <div>&gt; ...</div> 470101457554759 | 16.05.2023       | ГБУЗ МО        | C05.0   | На лабораторные исследования    | Завершено    | Нет              | Иванов<br>Онкология |
| <div>&gt; ...</div> 470101457554853 | 16.05.2023       | ГБУЗ МО        | C05.0   | На лабораторные исследования    | Аннулировано | Нет              | Иванов<br>Онкология |
| <div>&gt; ...</div> 470101457554204 | 16.05.2023       | Поликлиника    | C05.0   | На диагностические исследования | Аннулировано | Нет              | Иванов<br>Онкология |

Блок «Журнал направлений»

Журнал направлений состоит из следующих вкладок: «Выписать направление», «Выписать пакет направлений», «Создать пакет направлений».

Во вкладке «Выписать направление» в списке отображается номер направления, дата направления, ФИО направившего врача и специальность, наименование МО исследования, код диагноза пациента, наличие записи пациента на прием, тип направления, статус. При наведении на код диагноза отображается полное наименование диагноза.

| № Направления                       | Дата направления | Куда направлен | Диагноз                                                  | Тип                          | Статус    | Записан          | Направивший врач    |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| <div>&gt; ...</div> 470101457554046 | 16.05.2023       | ГБУЗ МО        | C05.0                                                    | На лабораторные исследования | Завершено | 24.05.2023 16:15 | Иванов<br>Онкология |
|                                     |                  |                | C05.0 - Злокачественное новообразование<br>твёрдого неба |                              |           |                  |                     |

Отображение полного наименования диагноза

Требуемое направление на исследование можно открыть для просмотра и редактирования, напечатать, аннулировать или удалить. Действия по редактированию и аннулированию доступны для карты со статусом «Выписано». Для закрытой карты доступны только действия по просмотру и печати направления. Кнопка «Удалить» доступна только для направления со статусом «Черновик».

| № Направления                       | Дата направления | Куда направлен | Диагноз | Тип                          | Статус   | Записан | Направивший врач    |
|-------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------------------------|----------|---------|---------------------|
| <div>&gt; ...</div> 470101457562993 | 29.05.2023       | ГБУЗ МО        | A01.0   | На лабораторные исследования | Выписано | Нет     | Иванов<br>Онкология |

Кнопки возможных действий с направлением в открытой карте медицинских исследований

|                                     |            |             |       |                 |          |     |  |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|--|
| <div>&gt; ...</div> 470101457555009 | 17.05.2023 | Поликлиника | A00.0 | На консультацию | Выписано | Нет |  |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------|-----------------|----------|-----|--|

Кнопки возможных действий с направлением в закрытой карте медицинских исследований


|                                                                                   | № Направления   | Дата направления | Куда направлен | Диагноз | Тип                          | Статус   | Записан | Направивший врач    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------|------------------------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 470101457562993 | 29.05.2023       | ГБУЗ МО        | A01.0   | На лабораторные исследования | Черновик | Нет     | Иванов<br>Онкология |  |

Кнопки возможных действий с направлением в статусе «Черновик»

Для того чтобы просмотреть направление, необходимо его выделить и нажать кнопку . Для удаления направления следует нажать кнопку .

Для редактирования направления следует нажать кнопку , откроется заполненная форма направления. Заполнение формы описано ниже.


Для направлений на консультацию и госпитализацию в статусе «Завершено» доступно действие «Перейти в «Случай лечения»». Для этого следует нажать кнопку  и выбрать пункт «Перейти в случай лечения».

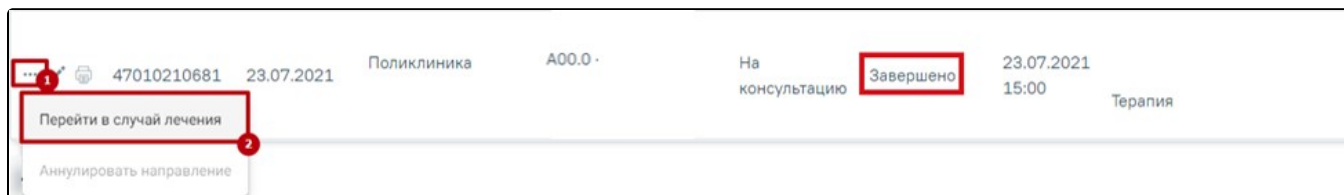

Переход в случай лечения

Для того чтобы распечатать направление, необходимо его выделить и нажать кнопку . В новой вкладке браузера откроется печатная форма направления. Подробное описание печати направлений представлено ниже.

При нажатии кнопки  в строке с направлением на исследование отобразится список печатных форм, доступных для печати.

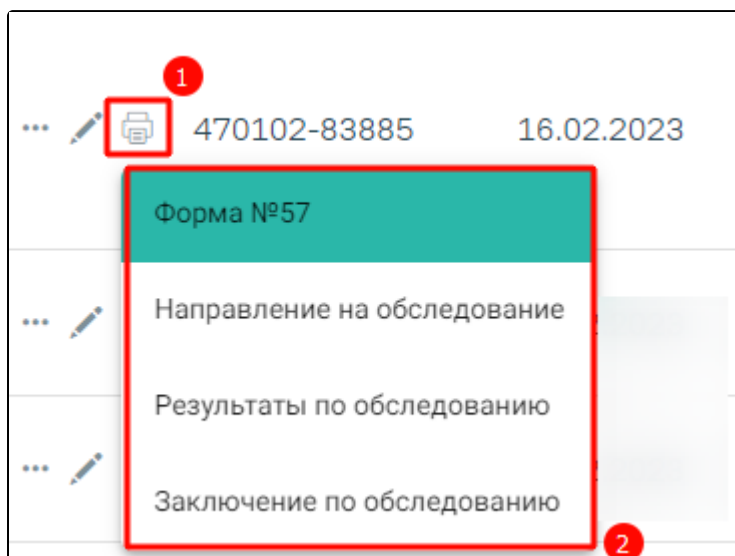

Список печатных форм

Далее в выпадающем списке необходимо выбрать нужный пункт. В новой вкладке браузера откроется выбранная печатная форма. Подробное описание печати направлений представлено ниже.

Если в направлении на лабораторное или диагностическое исследование несколько исследований находятся в разных статусах, при этом есть хотя бы одно исследование в статусе «Проведено» и выше, то пункт «Результаты по обследованию» будет доступен для выбора.

Для того чтобы аннулировать направление следует нажать кнопку  и выбрать пункт «Аннулировать направление» или нажать кнопку .

| № Направления                                                                        | Дата направления | Куда направлен       | Диагноз | Тип             | Статус   | Записан | Направивший врач    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|-----------------|----------|---------|---------------------|
| 470101457550717                                                                      | 12.05.2023       | Поликлиника (ГБУЗ МО | A01.1   | На консультацию | Выписано | Нет     | Иванов<br>Онкология |
| <div> <div>Перейти в случай лечения</div> <div>Аннулировать направление</div> </div> |                  |                      |         |                 |          |         |                     |

#### Аннулирование направления

Статус направления примет значение «Аннулировано». Аннулировать направление следует, если оно было создано ошибочно, либо если запись на приём по направлению была отменена.

| № Направления   | Дата направления | Куда направлен    | Диагноз | Тип             | Статус       | Записан | Направивший врач    |
|-----------------|------------------|-------------------|---------|-----------------|--------------|---------|---------------------|
| 470101457550717 | 12.05.2023       | Поликлиника (ГБУЗ | A01.1   | На консультацию | Аннулировано | Нет     | Иванов<br>Онкология |

#### Направление в статусе «Аннулировано»

При аннулировании направления из случая лечения следует выбрать причину и нажать кнопку «Аннулировать». Для отмены действия следует нажать кнопку «Заккрыть».

|                                                                                                                                      |                     |                                                 |       |                                    |          |     |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------|
| 47010127965706                                                                                                                       | 28.02.2024<br>08:58 | Поликлиника<br>(ГБУЗ МО<br>"Талдомская<br>ЦРБ") | C00.0 | На диагностические<br>исследования | Выписано | нет | Иванов Петр Сергеевич,<br>Терапия |
| <div> <div>Причина аннулирования</div> <div>Неявка пациента на обследование</div> <div>Аннулировать</div> <div>Заккрыть</div> </div> |                     |                                                 |       |                                    |          |     |                                   |

#### Аннулирование направления из случая лечения

Если приём пациента по направлению состоялся, то такое направление аннулировать нельзя. При наведении курсора на пункт меню «Аннулировать направление» отобразится всплывающая подсказка «Прием пациента уже состоялся. Не требуется отменять или переносить талон».

| Диагноз | Тип                            | Статус   | Записан             | Направивший врач |
|---------|--------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| J45     | На санаторно-курортное лечение | Выписано | 28.03.2022<br>09:30 |                  |

#### Отображение всплывающей подсказки при наведении на пункт меню

Если направление находится в статусе «Частично завершено», «Завершено», «Обработано», «Зарегистрировано» действие удалить или аннулировать недоступно, при наведении на значок отобразится сообщение «Для данного статуса направления действие недоступно».

|             |            |             |                                       |           |                                                     |
|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 47010281344 | 07.12.2022 | Поликлиника | На исследование сывороточных маркеров | Завершено | Для данного статуса направления действие недоступно |
|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|

#### Отображение всплывающей подсказки «Для данного статуса направления действие недоступно»

Для направлений на исследования в статусе «Выписано», «Частично завершено», «Завершено», «Аннулировано» доступна кнопка «Развернуть», которая позволяет раскрыть направление для отображения входящих в него исследований. Список исследований представлен в виде таблицы со следующими столбцами:

- Вид исследования - отображается вид исследования, добавленный в данное направление;
- Исследование - отображается наименование исследования, добавленное в данное направление;
- Статус - отображается текущий статус исследования;
- Дата заключения - отображается дата и время оформления заключения для направлений со статусом «Завершено».

## Журнал направлений

[Выписать направление](#) [Выписать пакет направлений](#) [Создать пакет направлений](#)

Выберите тип направления  
Лабораторные исследования x [Создать](#)

Строк на странице: 5 Записей: 10 < Пред. 1 2 След. >

|                                       | № Направления  | Дата направления                                                                              | Куда направлен | Диагноз            | Тип                             | Статус                      | Записан          | Направивший врач |  |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--|
| <span>1</span>                        | 47010127986778 | 09.04.2024 17:04                                                                              |                | A00 <span>1</span> | На лабораторные исследования    | Завершено                   | нет              |                  |  |
| <b>Вид исследования</b>               |                | <b>Исследование</b>                                                                           |                | <b>Статус</b>      |                                 | <b>Дата заключения</b>      |                  |                  |  |
| 601 - Микробиологические исследования |                | A26.01.013 - Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата кожи на дрожжевые грибы |                | Завершено          |                                 | 09.04.2024 17:04            |                  |                  |  |
|                                       | 47010127980342 | 27.03.2024 13:58                                                                              |                | A00 <span>1</span> | На диагностические исследования | Выписано                    | нет              |                  |  |
|                                       | 47010127980459 | 27.03.2024 12:51                                                                              |                | A00 <span>1</span> | На диагностические исследования | Выписано                    | нет              |                  |  |
|                                       | 47010127967148 | 29.02.2024 14:16                                                                              |                | A00 <span>1</span> | На консультацию                 | Выписано                    | 07.03.2024 15:30 |                  |  |
|                                       | 47010127986782 | 09.04.2024 17:07                                                                              |                | A00 <span>1</span> | На лабораторные исследования    | Аннулировано <span>1</span> | нет              |                  |  |

Таблица с информацией об исследовании

При нажатии на запись исследования будет выполнен переход к форме «[Результат исследования](#)» выбранного исследования.

При нажатии кнопки для направлений на МСЭ в статусе «Отправлен» доступна печать формы «Направление на МСЭ (088/y)».

| влен | Диагноз              | Тип                             | Статус    | Записан | Направивший врач |  |
|------|----------------------|---------------------------------|-----------|---------|------------------|--|
|      | Z25.8 <span>1</span> | На телемедицинскую консультацию | Черновик  | нет     |                  |  |
|      | Z25.8 <span>1</span> | На медико-социальную экспертизу | Отправлен | нет     |                  |  |

Печать формы «Направление на МСЭ (088/y)»

Для создания направления необходимо выбрать тип направления из выпадающего списка, открываемого щелчком мыши по нему, и нажать кнопку «Создать».

Выберите тип направления

1

Лабораторные исследования

Диагностические исследования

Госпитализация по экстренным показаниям

Плановая госпитализация

Консультация


2

Создать

#### Создание направления

Направление может быть оформлено на [диагностические исследования](#), [лабораторные исследования](#), [консультацию](#), [медицинскую реабилитацию](#), [санаторно-курортное лечение](#), [плановую госпитализацию](#), [госпитализацию по экстренным показаниям](#), [к месту лечения в рамках плановой госпитализации](#), [на госпитализацию для оказания высокотехнологичной помощи](#), [на госпитализацию для оказания специализированной помощи](#), [неонатальный скрининг](#), [на патоморфологию](#), [телемедицинскую консультацию](#), [BPT](#), [МСЭ](#), [исследование сывороточных маркеров](#).

Если в МКАБ пациента не указан СНИЛС и Полис, то при открытии формы направления отобразятся предупреждающие сообщения.

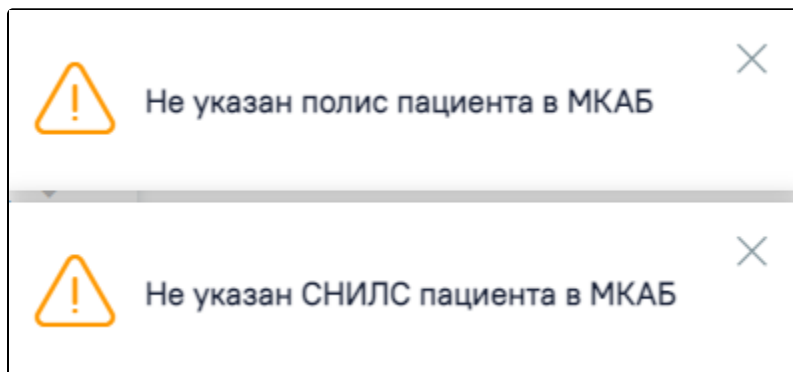

#### Предупреждающие сообщения

### Создание пакета направлений

Для направления пациента на несколько исследований предусмотрена возможность создания пакета направлений с последующей выпиской и выводом на печать.

Для того чтобы создать пакет направлений следует перейти во вкладку «Создать пакет направлений», установить флажок ☒ в строке с необходимым направлением, затем нажать кнопку «Создать пакет направлений». Создать пакет направлений можно только для направлений с типом «На лабораторные исследования» и «На диагностические исследования» в статусе «Выписано», «Частично завершено», «Завершено».

|                           |         |                              |          |         |                  |
|---------------------------|---------|------------------------------|----------|---------|------------------|
| ет направлений            |         |                              |          |         |                  |
| Создать пакет направлений |         |                              |          |         |                  |
|                           |         |                              |          |         |                  |
|                           |         |                              |          |         |                  |
|                           |         |                              |          |         |                  |
| да направлен              | Диагноз | Тип                          | Статус   | Записан | Направивший врач |
|                           | A00.0 ⓘ | На лабораторные исследования | Выписано | Нет     | Терапия          |

Кнопка «Создать пакет направлений»

В результате в новой вкладке браузера откроется форма формирования пакета направлений, которую необходимо заполнить.

Вернуться в ТАП

☰

Формирование пакета направлений

Пользователь  
Иванов Петр Сергеевич

Наименование пакета

☐ Пакет направлений для специальности

Специальность

▼ Направления для создания пакета направлений | Количество 2

| Цель исследования               | Причина исследования    | Лаборатория | Куда направлен | Срочное                  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| ➤ Профилактическое исследование | Самообращение по жалобе |             |                | <input type="checkbox"/> |
| ➤ Профилактическое исследование | Самообращение по жалобе |             |                | <input type="checkbox"/> |

Отменить

Сформировать

Форма формирование пакета направлений

Поле «Пользователь» заполняется автоматически данными пользователя, создающего пакет направлений, недоступно для редактирования. В поле «Наименование пакета» необходимо ввести наименование пакета направлений на исследования вручную с клавиатуры. Если для пакета направлений нужно указать специальность, то следует установить флажок в поле «Пакет направлений для специальности». В результате станет доступно поле «Специальность», в котором следует выбрать необходимую специальность из справочника.

Формирование пакета направлений

Пользователь

Наименование пакета  
Пакет направлений для специальности терапия

☒ Пакет направлений для специальности

Специальность \*  
76 - Терапия


Указание специальности для пакета направлений

Если при формировании пакета направлений специальность не была указана, то такой пакет направлений будет отображаться для всех пользователей. Если специальность была указана, то данный пакет направлений отображается для пользователей с указанной специальностью. В блоке «Направления для создания пакета направлений» отображаются исследования выбранные для формирования пакета направлений.

| Направления для создания пакета направлений   Количество 2 |                         |             |                |                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| Цель исследования                                          | Причина исследования    | Лаборатория | Куда направлен | Срочное                  |
| Профилактическое исследование                              | Самообращение по жалобе |             |                | <input type="checkbox"/> |
| Профилактическое исследование                              | Самообращение по жалобе |             |                | <input type="checkbox"/> |

Блок «Направления для создания пакета направлений»

Справа от наименования блока отображается общее количество выбранных направлений.

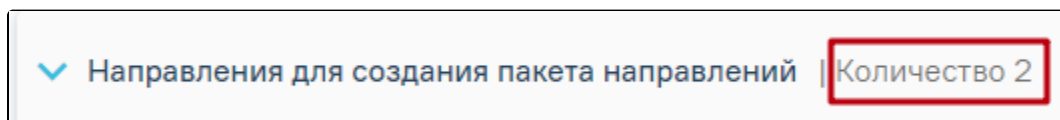

Количество выбранных направлений

Для просмотра списка исследований входящих в направление следует нажать кнопку рядом с нужным направлением.

| Направления для создания пакета направлений   Количество 2                 |                         |                                                                                                              |                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Цель исследования                                                          | Причина исследования    | Лаборатория                                                                                                  | Куда направлен | Срочное                  |
| Профилактическое исследование                                              | Самообращение по жалобе |                                                                                                              |                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Вид исследования</b>                                                    |                         | <b>Исследование</b>                                                                                          |                |                          |
| 39 - Сложная диагностическая услуга, формирующие диагностические комплексы |                         | B03.027.026 - Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований ануса и анального канала |                |                          |
| Профилактическое исследование                                              | Самообращение по жалобе |                                                                                                              |                | <input type="checkbox"/> |

Список исследований входящий в направление

Список исследований представлен в виде таблицы со следующими столбцами:

- «Вид исследования» – отображается вид исследования, входящее в направление;
- «Исследование» – отображается наименование исследования.

Для скрытия списка исследований необходимо повторно нажать кнопку .



Если в направлении на исследование установлен признак , то в блоке «Направления для создания пакета направлений» рядом с таким направлением по умолчанию будет установлен флажок в столбце «Срочное».

| Направления для создания пакета направлений   Количество 3       |                         |             |                |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| Цель исследования                                                | Причина исследования    | Лаборатория | Куда направлен | Срочное                             |
| Профилактическое исследование                                    | Самообращение по жалобе |             |                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Исследование</b>                                              |                         |             |                |                                     |
| A06.12.018 - Ангиография артерии верхней конечности ретроградная |                         |             |                |                                     |
| A06.12.008 - Ангиография артерии щитовидной железы               |                         |             |                |                                     |
| Профилактическое исследование                                    | Самообращение по жалобе |             |                | <input type="checkbox"/>            |
| Профилактическое исследование                                    | Самообращение по жалобе |             |                | <input type="checkbox"/>            |

Отображение признака «Срочное»

После заполнения необходимых данных следует нажать кнопку «Сформировать».

## Формирование пакета направлений

Пользователь

Наименование пакета  
Пакет направлений для специальности терапия

☒ Пакет направлений для специальности  
Специальность \*  
76 - Терапия

✓ Направления для создания пакета направлений | Количество 3

| Цель исследования             | Причина исследования    | Лаборатория | Куда направлен | Срочное                             |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| Профилактическое исследование | Самообращение по жалобе |             |                | <input type="checkbox"/>            |
| Профилактическое исследование | Самообращение по жалобе |             |                | <input type="checkbox"/>            |
| Диагностическое исследование  | Самообращение по жалобе |             |                | <input checked="" type="checkbox"/> |

Отменить Сформировать


Заполненная форма формирования пакета направлений

При успешном формировании появится соответствующее сообщение.



Сообщение об успешном формировании пакета направлений

Если наименование пакета направлений совпадает с наименованием существующего пакета направлений, при формировании пакета направлений появится сообщение об ошибке. Необходимо изменить наименование и повторно нажать кнопку «Сформировать».

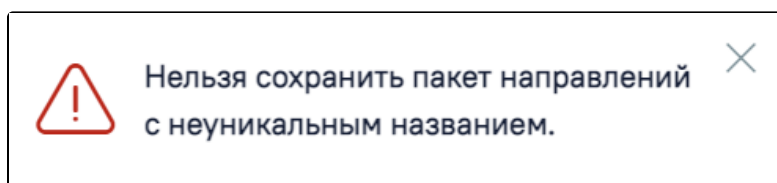

Сообщение об ошибке

Для направлений на исследования в статусе «Выписано», «Частично завершено», «Завершено», «Аннулировано» доступна кнопка «Развернуть», которая позволяет раскрыть направление для отображения входящих в него исследований. Список исследований представлен в виде таблицы со следующими столбцами:

- Вид исследования - отображается вид исследования, добавленный в данное направление;
- Исследование - отображается наименование исследования, добавленное в данное направление;
- Статус - отображается текущий статус исследования;
- Дата заключения - отображается дата и время оформления заключения для направлений со статусом «Завершено».

| лений      Создать пакет направлений                                                            |         |                              |           |                            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| <div> <div>&lt; Пред.</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>След. &gt;</div> </div> |         |                              |           |                            |                  |
| пен                                                                                             | Диагноз | Тип                          | Статус    | Записан                    | Направивший врач |
|                                                                                                 | A00 ⓘ   | На лабораторные исследования | Завершено | 22.04.2024, вне расписания |                  |
| вание                                                                                           |         |                              |           | Статус                     | Дата заключения  |
| 001.002 - Электромиография накожная одной анатомической                                         |         |                              |           | Завершено                  | 22.04.2024 15:14 |

Таблица с информацией об исследовании

## Выписка пакета направлений

Для создания направлений по сформированному ранее пакету следует перейти во вкладку «Выписать пакет направлений».

| Журнал направлений                                                    |                  |                            |         |                                                                                    |                           |         |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Выписать направление                                                  |                  | Выписать пакет направлений |         |                                                                                    | Создать пакет направлений |         |                                                                  |
| Выберите пакет направления                                            |                  |                            |         | ☆                                                                                  | Выписать                  | Удалить | <input type="checkbox"/> Сформировать пакет в статусе "Выписано" |
| Строк на странице: 5                                                  |                  | Записей: 6                 |         | <div> <div>&lt; Пред.</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>След. &gt;</div> </div> |                           |         |                                                                  |
| № Направления                                                         | Дата направления | Куда направлен             | Диагноз | Тип                                                                                | Статус                    | Записан | Направивший врач                                                 |
| <div> <div>&gt;</div> <div>...</div> <div>✎</div> </div> 470102-99587 | 08.04.2024 15:45 | Поликлиника                | A00 ⓘ   | На прижизненное патолого-анатомическое исследование                                | Черновик                  | нет     |                                                                  |

Вкладка «Выписать пакет направлений»

Для выписки необходимо выбрать пакет направлений из выпадающего списка и нажать кнопку «Выписать». Справа от наименования пакета направлений отображается ФИО пользователя, создавшего данный пакет направлений.

|                                        |  |                            |  |   |                           |         |                                                                  |
|----------------------------------------|--|----------------------------|--|---|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Выписать направление                   |  | Выписать пакет направлений |  |   | Создать пакет направлений |         |                                                                  |
| Выберите пакет направления             |  |                            |  | ☆ | Выписать                  | Удалить | <input type="checkbox"/> Сформировать пакет в статусе "Выписано" |
| пакет направлений 1 (  Петр Сергеевич) |  |                            |  | × |                           |         |                                                                  |

Выписка пакета направлений

Для просмотра исследований, входящих в пакет, следует навести курсор на наименование, после чего отобразится список с указанием входящих исследований.

Выписать направление
Выписать пакет направлений
Создать пакет направлений

Выберите пакет направления  
пакет направлений 1 (Пётр Сергеевич)

✕ ☆ Выписать Удалить ☐ Сформировать пакет в статусе "Выписано"

☆ пакет направлений 1 (Пётр Сергеевич)  
☆ пакет направлений 2 (Пётр Сергеевич)  
★ пакет направлений 3 (Пётр Сергеевич)  
☆ пакет направлений 5 (Пётр Сергеевич)  
☆ пакет направлений 4 (Пётр Сергеевич)

Исследования:  
A03.18.001.005 - Аутофлюоресцентное эндоскопическое исследование слизистой толстой кишки  
A03.30.006.004 - Аутофлюоресцентное эндоскопическое исследование пищевода и желудка  
A03.18.001.005 - Аутофлюоресцентное эндоскопическое исследование слизистой толстой кишки  
A03.26.014 - Аномалоскопия

След. >

#### Информация об обследованиях

Выписанные направления будут добавлены в список направлений в статусе «Черновик».

Выписать направление
Выписать пакет направлений
Создать пакет направлений

Выберите пакет направления  
пакет направлений 1 (Пётр Сергеевич)

✕ ☆ Выписать Удалить ☐ Сформировать пакет в статусе "Выписано"

Строк на странице: 5 Записей: 8

< Пред. 1 2 След. >

| № Направления        | Дата направления | Куда направлен | Диагноз | Тип                          | Статус   | Записан | Направивший врач |
|----------------------|------------------|----------------|---------|------------------------------|----------|---------|------------------|
| > ... 47010127986376 | 09.04.2024 14:30 | Поликлиника    |         | На лабораторные исследования | Черновик | нет     |                  |

#### Направления выписанные из пакета направлений

Для выписки направлений в статусе «Выписано» без подписания и без отправки в РЭМД/ВИМИС следует выбрать пакет направлений и установить флажок «Сформировать пакет в статусе "Выписано"», затем нажать кнопку «Выписать».

Выписать направление
Выписать пакет направлений
Создать пакет направлений

Выберите пакет направления  
пакет направлений 1 (Пётр Сергеевич)

✕ ☆ Выписать Удалить ☒ Сформировать пакет в статусе "Выписано"

#### Выписка направлений в статусе «Выписано»

В результате выполнения действия направления будут успешно сформированы в статусе «Выписано».

Выписать направление
Выписать пакет направлений
Создать пакет направлений

Выберите пакет направления  
пакет направлений 1 (Пётр Сергеевич)

✕ ☆ Выписать Удалить ☐ Сформировать пакет в статусе "Выписано"

Строк на странице: 5 Записей: 14

< Пред. 1 2 3 След. >

| № Направления        | Дата направления | Куда направлен | Диагноз | Тип                          | Статус   | Записан | Направивший врач |
|----------------------|------------------|----------------|---------|------------------------------|----------|---------|------------------|
| > ... 47010127986483 | 09.04.2024 14:57 | Поликлиника    | A00     | На лабораторные исследования | Выписано | нет     |                  |

#### Направление в статусе «Выписано», выписанное из пакета направлений

Существует возможность добавления пакета направлений в «Избранное». Для этого необходимо рядом с нужным пакетом направлений нажать



Выберите пакет направления

- ☆ 123123123 (ТемниковТри ДмитрийТри Олега...)
- ☆ ПетраковБитые2 (ТемниковТри ДмитрийТри ...)
- ☆ тестовый3 ( [REDACTED] Петр Сергеевич)
- ★ тестовый3 ( [REDACTED] Петр Сергеевич)
- ☆ тестовый3 ( [REDACTED] Петр Сергеевич)

Добавление пакета направлений в «Избранное»

Рядом с «Избранными» пакетами направлений отображается значок



Для просмотра «Избранных» пакетов направлений необходимо на форме выбора пакета направлений нажать



Выписать направление    **Выписать пакет направлений**    Создать пакет направлений

Выберите пакет направления

☒ Выписать   
 ☐ Удалить   
 ☐ Сформировать пакет в статусе "Выписано"

Избранные пакеты направлений

Переход к избранным пакетам направлений

Отобразится список «Избранных» пакетов направлений.

Исследования

- ☐ 7012982 - Комплексное сцинтиграфическое исследование гемангиомы печени с однофотонной эмиссионной компьютерн... ★
- ☐ 7002033 - Компьютерная томография ангиография живота ★
- ☐ 7001738 - Компьютерная томография височных костей ★
- ☐ 7015159 - Ультразвуковое исследование почки интраоперационное при робот-ассистированном вмешательстве ★
- ☐ 7004591 - Ультразвуковое исследование почки трансабдоминальное с внутривенным контрастированием ★
- ☐ 7015092 - Ультразвуковое сопровождение абляции высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком образования п... ★

Исследование


Добавить

Список «Избранных» пакетов направлений

Для удаления пакетов направлений из «Избранного» необходимо рядом с пакетом направлений нажать



В строке направления выписанного из пакета направлений отображается значок , при наведении курсора на значок появится всплывающая подсказка.

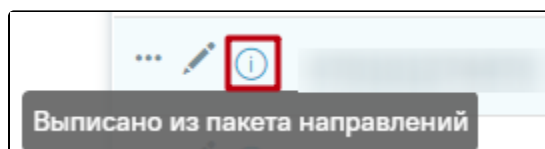

Всплывающая подсказка с информацией, что направление выписано из пакета направлений

Для удаления пакета направлений следует выбрать в поле «Выберите пакет направлений» нужное значение, затем нажать кнопку «Удалить». Кнопка «Удалить» доступна пользователю, создавшему выбранный пакет, и администратору Системы.

A screenshot of the "Выписать пакет направлений" interface. It shows a tabbed interface with three tabs: "Выписать направление", "Выписать пакет направлений" (active), and "Создать пакет направлений". Below the tabs, there is a dropdown menu labeled "Выберите пакет направления" with the selected option "пакет направлений 1 (Пётр Сергеевич)". To the right of the dropdown are icons for "x" and "☆". Further right are two buttons: "Выписать" and "Удалить". To the right of these buttons is a checkbox labeled "Сформировать пакет в статусе 'Выписано'". Red circles with numbers 1 and 2 highlight the dropdown menu and the "Удалить" button, respectively.

#### Удаление пакета направлений

В результате выполнения действия «Удалить» отобразится сообщение о необходимости подтверждения удаления пакета направлений.

A screenshot of the confirmation dialog for deleting a package of directions. It shows the same interface as the previous screenshot, but with a red border around the confirmation message. The message reads: "Вы действительно хотите удалить пакет направлений?". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Нет" and "Да".

#### Подтверждение действия

Для того чтобы подписать или редактировать выписанное направление следует нажать кнопку . Откроется заполненная форма соответствующего направления.